

# 单机设备对接

原理

实现

IE浏览器+动态库

适用范围

前置条件

环境配置

- 1. 注册动态库
- 2. 虚拟打印机安装配置

谷歌浏览器+客户端

适用范围

前置条件

环境配置

虚拟打印机安装配置

操作说明

程序更新

程序清单

## 原理



## 实现

本文实现两种方案，分别基于IE浏览器+动态库 和 谷歌浏览器+客户端。

♥ 两种方案的程序一致，自动根据浏览器加载不同的代码。

## IE浏览器+动态库

### 适用范围

- IE8以上，不包含IE8

### 前置条件


- 按HIS客户端配置要求，配置IE浏览器（添加信任站点、允许脚本运行等）

### 环境配置

#### 1. 注册动态库

假设将DHCPEBase64.dll放在D盘根目录，以**管理员身份运行**CMD窗口，切换到D盘，执行命令

```
regsvr32 DHCPEBase64.dll
```

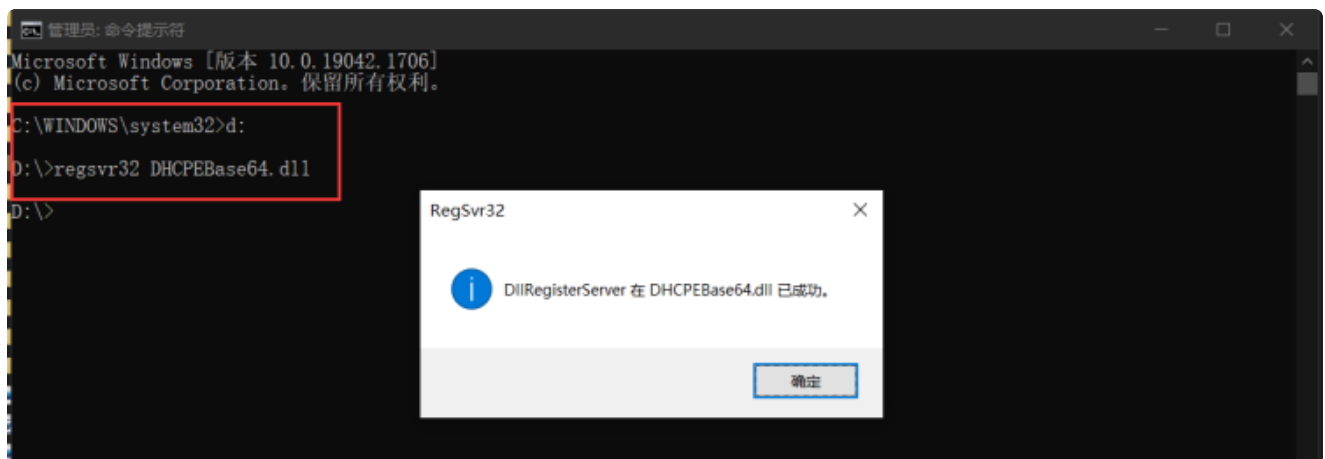

#### 2. 虚拟打印机安装配置


1. 创建本地目录，具体可自定义，本例：`D:\DHC\DHCPE\ReportImg\ckresult`

2. 安装虚拟打印机，注册码。


3. 将虚拟打印机设置成默认（或单机设备打印报告时手工选择本打印机）。

4. 配置虚拟打印机。


a. “保存”页签

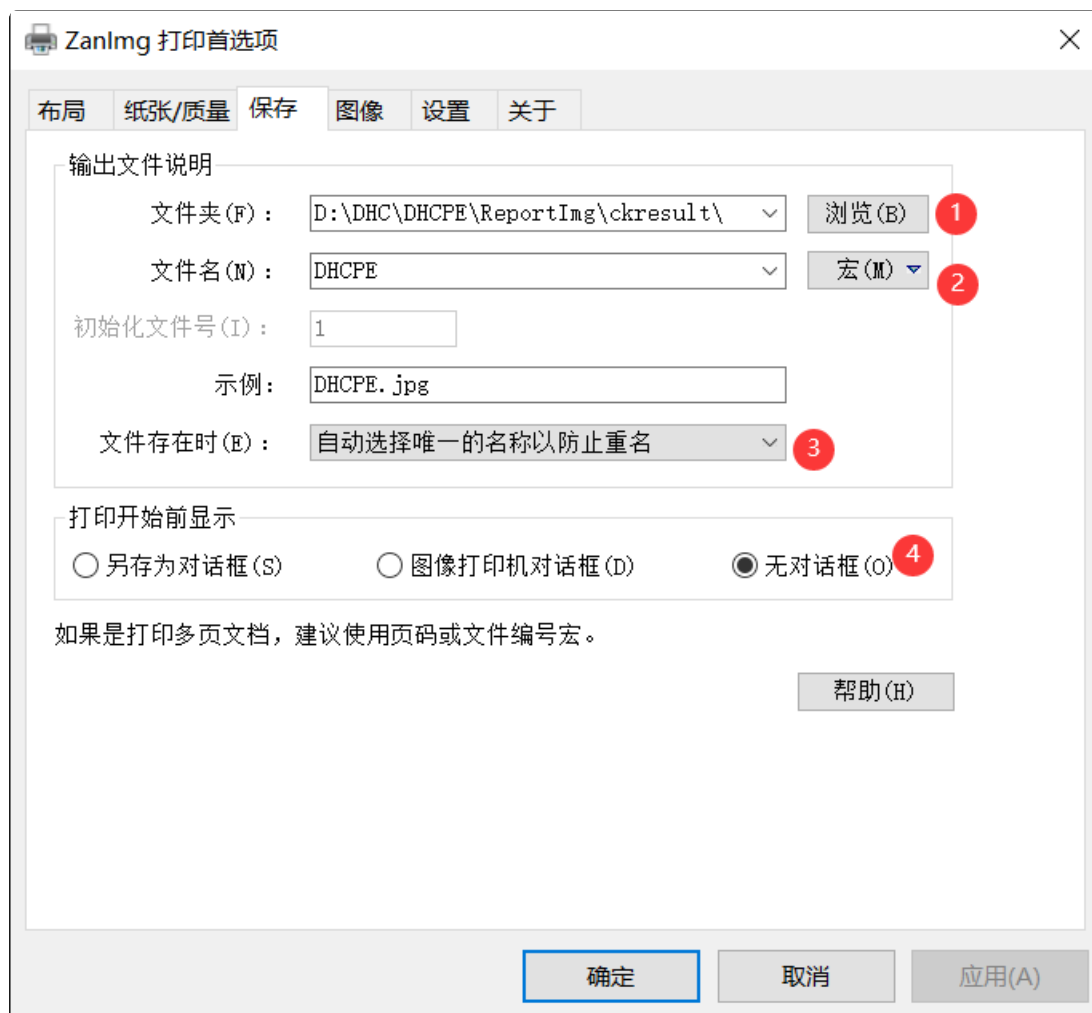

## b. “图像”页签

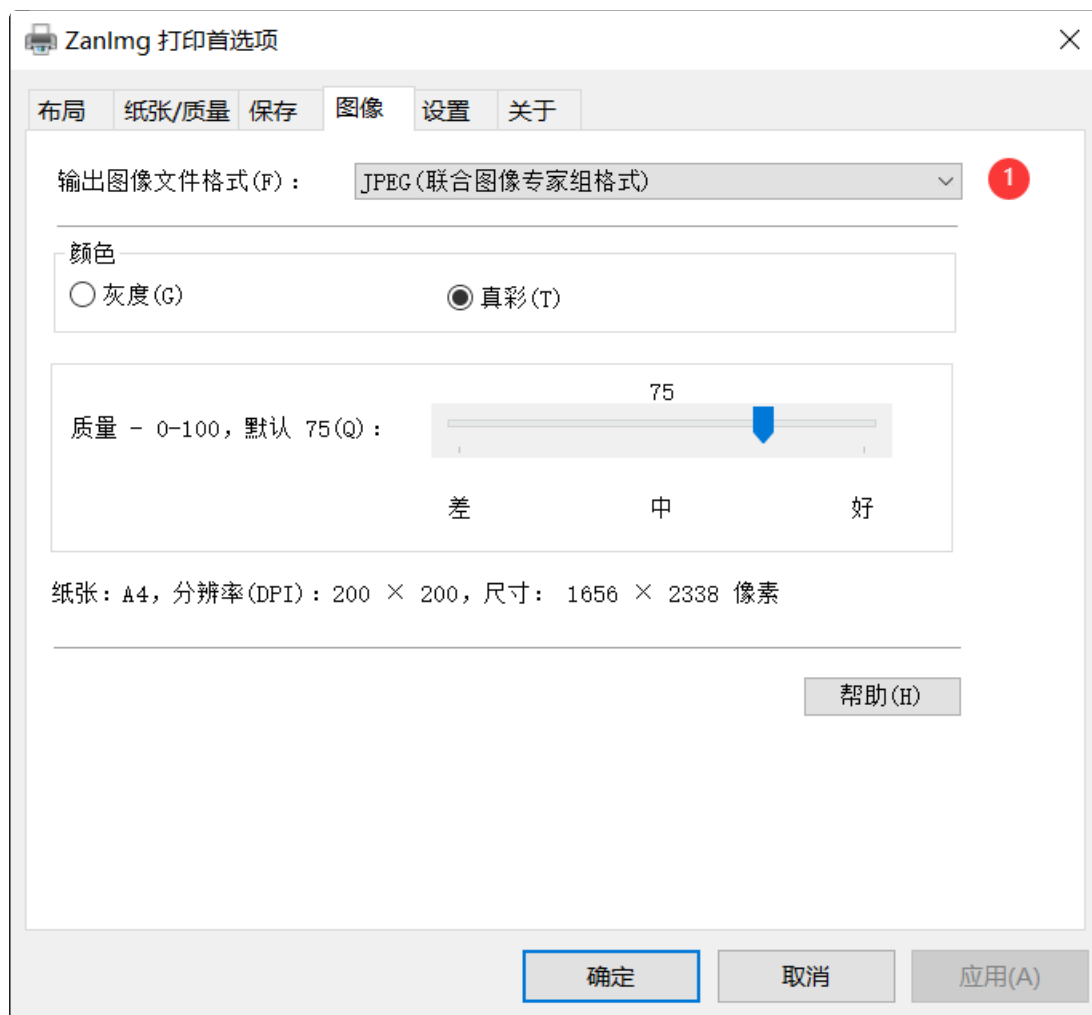

c. “设置”页签

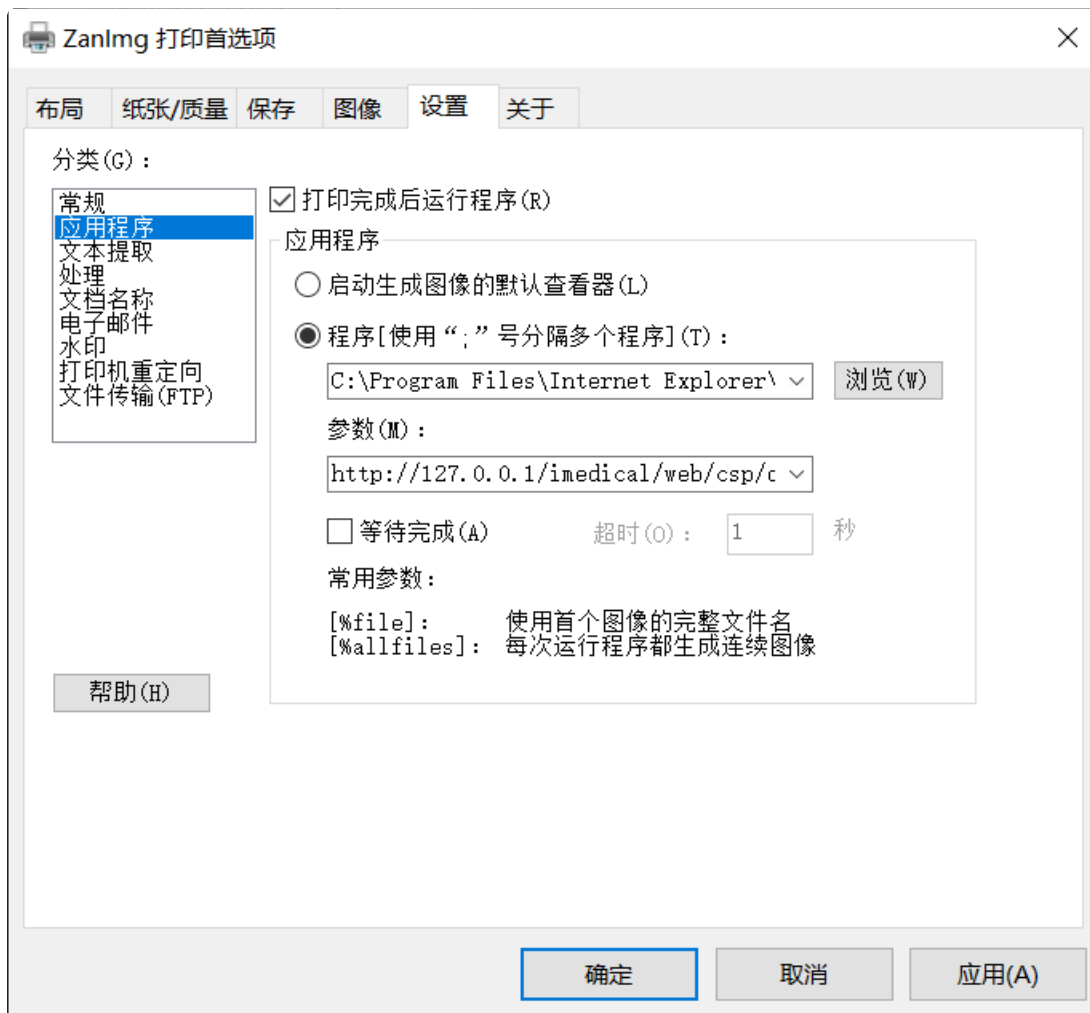

👉 程序：选择IE浏览器

👉 参数：<https://222.132.155.205:11443/medical/web/csp/dhcpe.uploadchkresult.csp?URCode=SC01&CurLocID=105>

- <https://222.132.155.205:11443>：体检系统地址
- URCode：对应体检系统设备维护里面的设备代码
- CurLocID：体检科室ID

## 谷歌浏览器+客户端

### 适用范围

- 理论上适用于任何环境。

### 前置条件

- 安装体检客户端 **V4.2.0** 及以上版本。

## 环境配置

### 虚拟打印机安装配置

参考[IE版本配置虚拟打印机](#)

◆ 唯一区别是最后【设置】页签【应用程序】选择谷歌浏览器。

## 操作说明

1. 单机设备打印报告时，虚拟打印机自动打开浏览器，访问本界面

体检上传十二导心电图检查检查信息

基本信息

性别: / 出生日期: / 病人号: / 检查项目: 十二导心电图检查 / 图片路径: D:\DHC\DHCP\Reporting\ckresult

体检号  用户编号 TJZX 读取文本

检查所见

检查结论

检查报告

没有数据哦!  
选条数据看看吧!  
No data!  
Please select one!

2. 当启用读取文本时，程序自动从生成的txt提取信息，并填充界面

3. 当未启用读取文本或未读取到数据时，需要扫体检号，后台获取体检信息。

4. 点击上传结果，进行图片上传和文字结果（不为空时）。



## 程序更新

本文基于8.5的系统介绍，其他版本请对比更新。

♥ 两种方案的程序一致，自动根据浏览器加载不同的代码。

## 程序清单

- 新增 dhcpe.uploadchkresult.csp
- 8.5无需更新 dhcpe.min.js
- 新增 dhcpe.uploadchkresult.js （谷歌浏览器）
- 新增 dhcpe.uploadchkresult.ie.js （IE浏览器）
- 新增 web.DHCPE.Utils.Upload.cls
- 对比更新 web.DHCPE.Interface.Main.cls